


BONE QUALITY

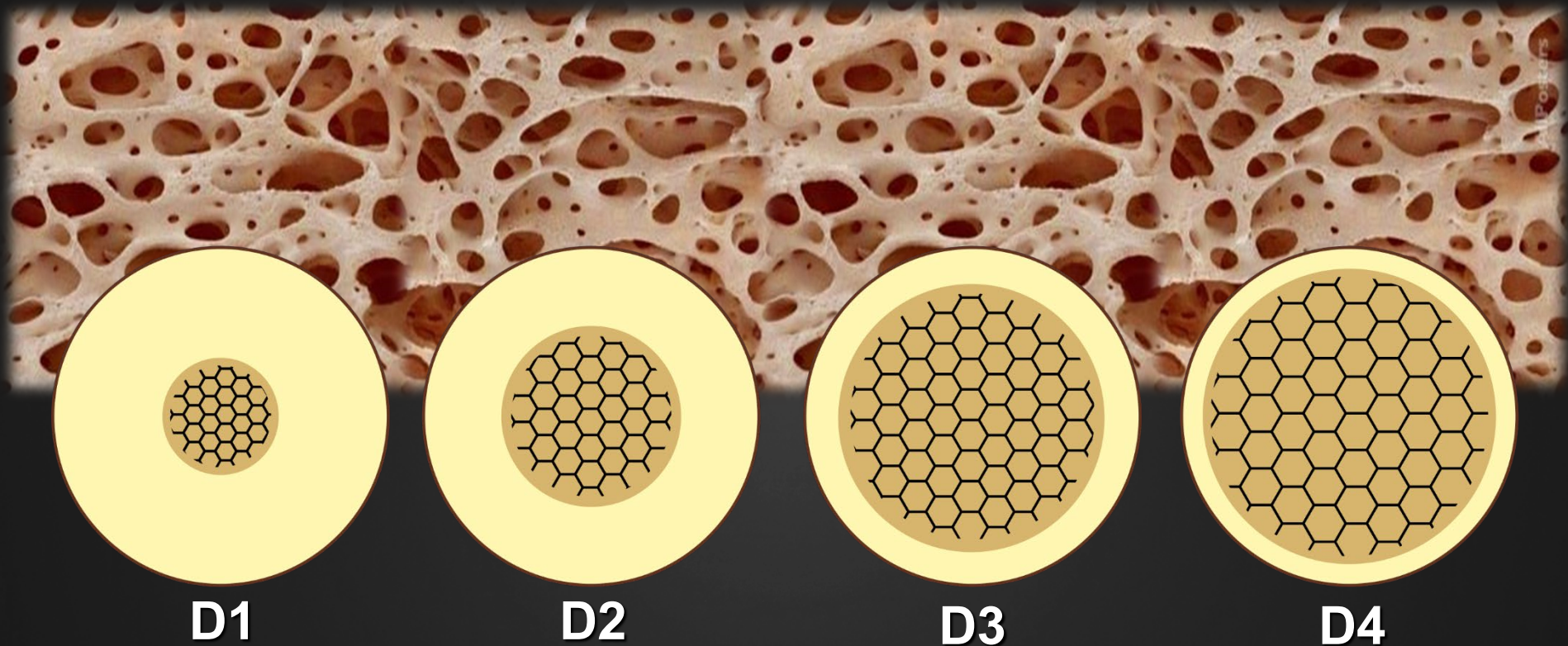

Bone classification: clinical-histomorphometric comparison.

Trisi P, Rao W.

Clin Oral Implants Res. 1999 Feb;10(1):1-7. doi: 10.1034/j.1600-0501.1999.100101.x.

VARIANTE DI PROTOCOLLO IMPIANTO IK42

IN FUNZIONE DELLA QUALITÀ OSSEA

D4



D3/D2



D1



VARIANTE DI PROTOCOLLO IMPIANTO IK42

INFUNZIONE DELLA QUALITÀ OSSEA


D4



D3/D2



D1

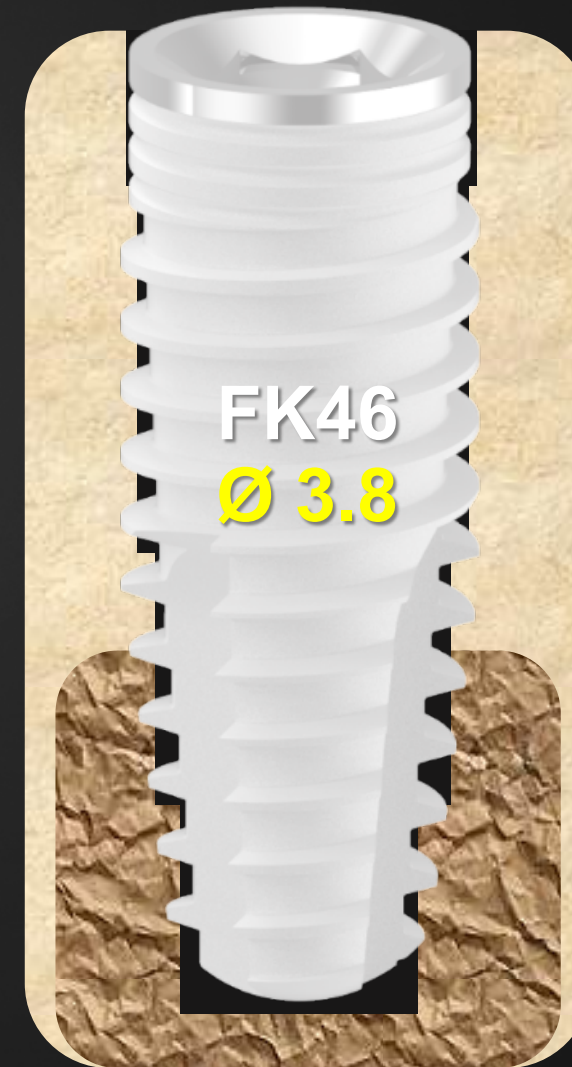



MODULAR SURGICAL DRILLING

La Rotazione Antioraria

Invertendo Le Forze In Gioco

Genera 3 Effetti Differenti

Sulla Pratica Chirurgica Di Preparazione


3

EFFETTI

- 1) Spinta anteriore e laterale di ciò che la punta asporta (osso), più tutti i liquidi in gioco, sangue e fisiologica
- 2) Espulsione più “effetto martello” della fresa stessa
- 3) Riduzione dell’efficienza di taglio.


ASPORTAZIONE ORARIA

TAGLIARE e ASPIRARE

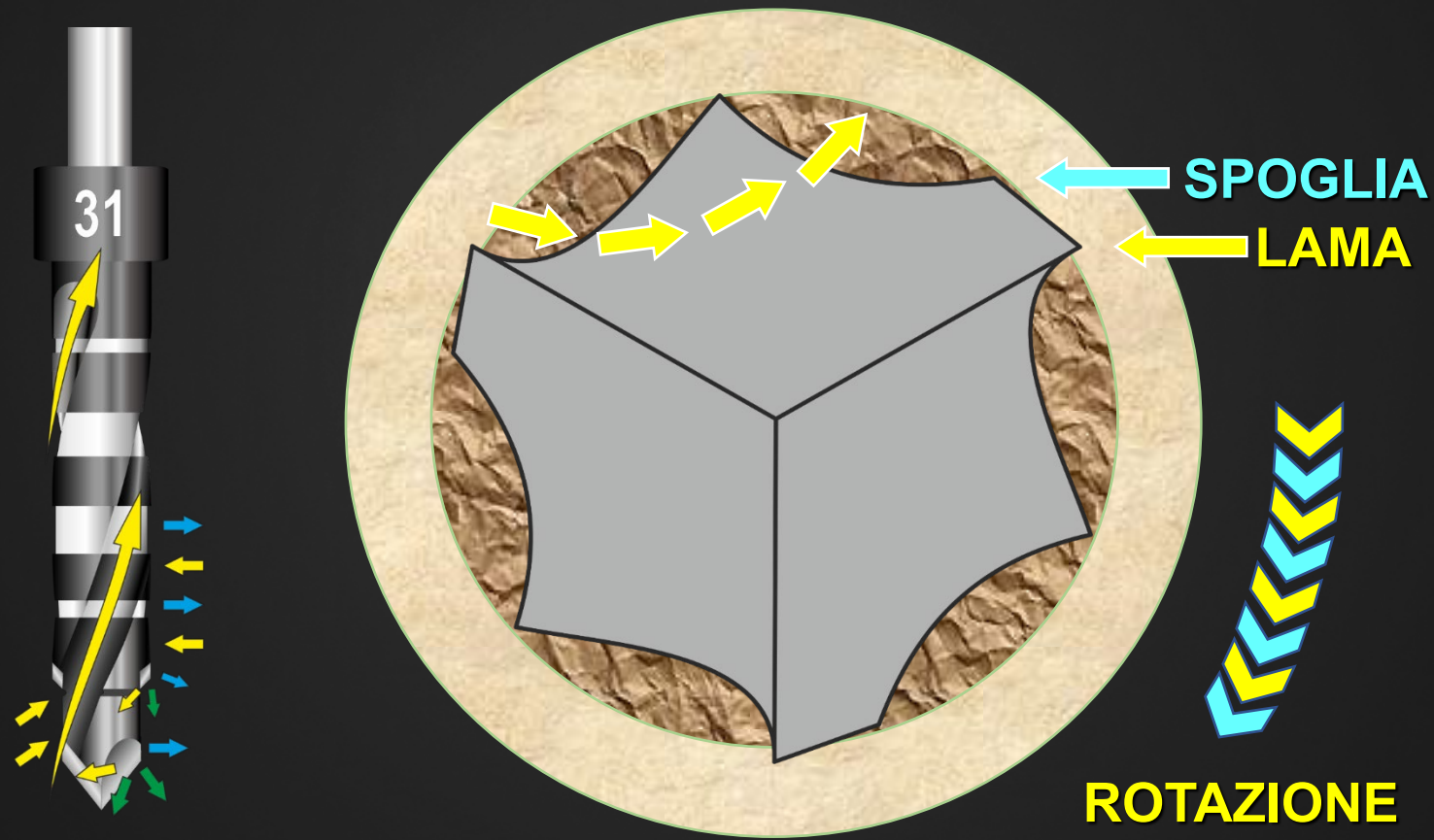

OSSEODENSIFICAZIONE ANTIORARIA



SCHIACCIARE e SPINGERE

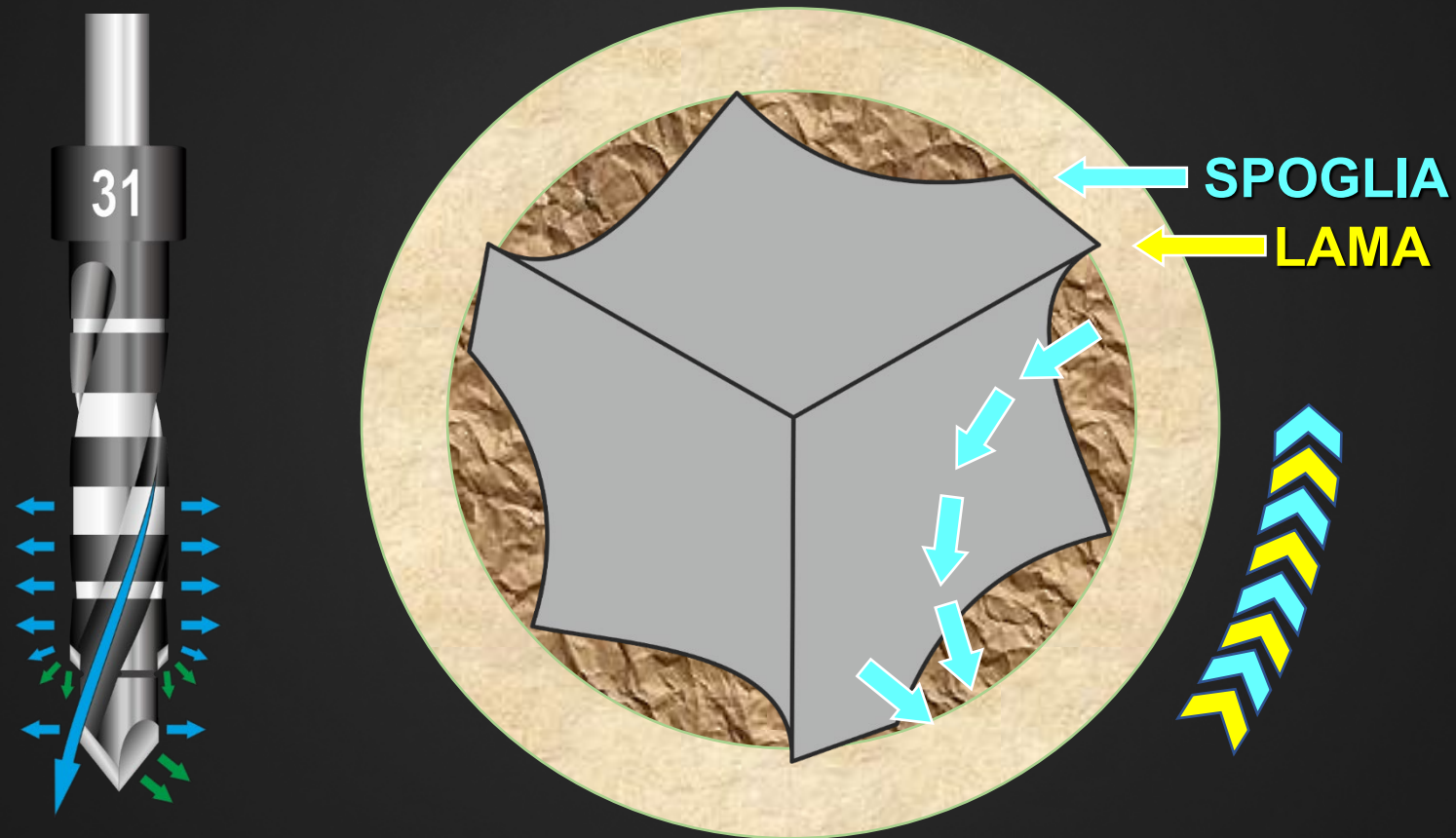



ANELLI SPAZIATORI OPZIONALI

RIDUCONO LA PROFONDITÀ
DI LAVORO DELLA FRESA

Ø4.15 mm

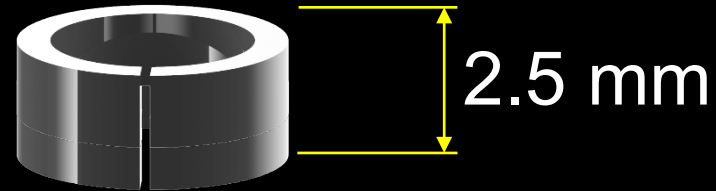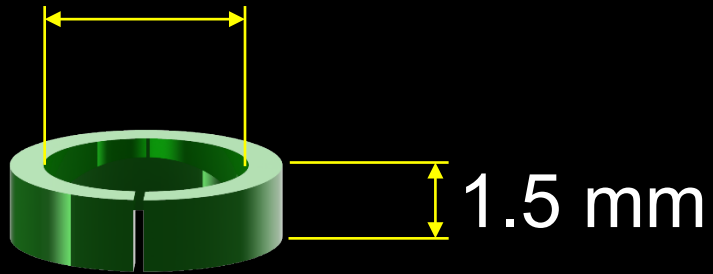

Ø5.5 mm

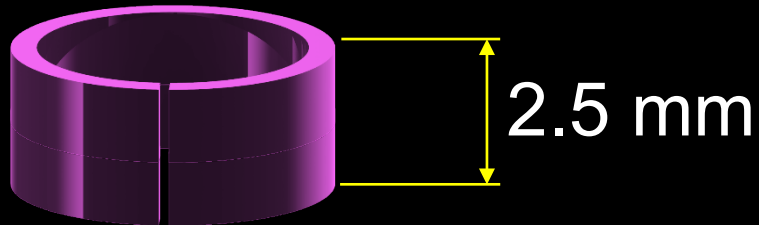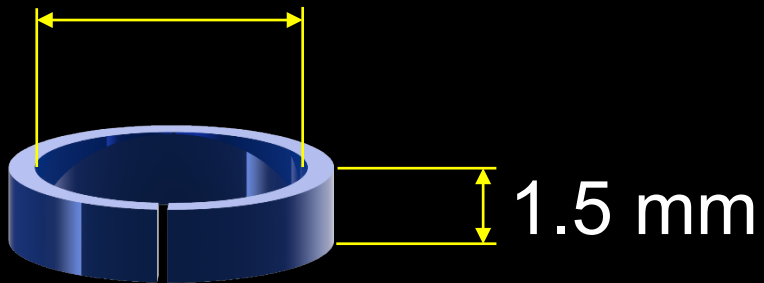

Fino alla battuta
dello stop fresa

